J DENTAL CARE

just smile

JD ICON®

Уникальные характеристики Icon



конусное соединение

Made in Italy

FDA Approved

JD ICON®

ПРОТОКОЛ ПРЕПАРИРОВАНИЯ

Рекомендуется придерживаться следующих указанных последовательностей сверления, чтобы обеспечить оптимальную первичную стабильность имплантатов.

Подготовка участка на верхней челюсти

	ЗАЖИВШАЯ КОСТЬ		КОСТЬ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ	
ДИАМЕТР ИМПЛАНТАТА	МЯГКАЯ КОСТЬ	КОСТЬ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ	МЯГКАЯ КОСТЬ	КОСТЬ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ
Ø 3.9	2.0 2.4 2.8 до 1ой лазерной отметки L 6 мм	2.0 2.4 2.8 3.2 до 1ой лазерной отметки L 6 мм	2.0 2.4 2.8 у входа	2.0 2.4 2.8 у входа
Ø 4.3	2.0 2.4 2.8 3.2 у входа	2.0 2.4 2.8 3.2 до 1ой лазерной отметки L 6-8 мм 3.6 у входа	2.0 2.4 2.8 3.2 у входа	2.0 2.4 2.8 3.2 у входа
Ø 5.0	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 до 1ой лазерной отметки L 6 мм	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 до 1ой лазерной отметки L 6 мм 4.0 у входа	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 у входа до 1ой лазерной отметки L 6 мм	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 у входа до 1ой лазерной отметки L 6 мм



Установка короткого имплантата L 6 мм JDIcon на верхней челюсти

короткий Ø 4.3 L 6	Начинайте остеотомию стандартным спиральным сверлом Ø 2.0 мм и Ø 2.4 мм Завершающее сверло Ø 4 мм, L 6 мм, код JDDICS4
короткий Ø 5.0 L 6	Начинайте остеотомию стандартным спиральным сверлом Ø 2.0 мм и Ø 2.4 мм Завершающее сверло Ø 4 мм, L 6 мм, код JDDICS4D

Подготовка участка на нижней челюсти


	ЗАЖИВШАЯ КОСТЬ		КОСТЬ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ	
ДИАМЕТР ИМПЛАНТАТА	МЯГКАЯ КОСТЬ	КОСТЬ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ	МЯГКАЯ КОСТЬ	КОСТЬ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ
Ø 3.9	2.0 2.4 2.8 3.2 до 2ой лазерной отметки L 8 мм 3.6 до 1ой лазерной отметки L 6 мм	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 до 1ой лазерной отметки L 6 мм	2.0 2.4 2.8 3.2 у входа	2.0 2.4 2.8 3.2 у входа
Ø 4.3	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 до 2ой лазерной отметки L 8 мм 4.0 до 2ой лазерной отметки L 8 мм	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 до 2ой лазерной отметки L 8 мм 4.4 до 1ой лазерной отметки L 6 мм	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 у входа	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 у входа
Ø 5.0	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 до 2ой лазерной отметки L 8 мм 4.8 у входа	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 4.4 4.8 у входа	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 у входа	2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 у входа



Установка короткого имплантата L 6 мм JDIcon на нижней челюсти

короткий Ø 4.3 L 6	Начинайте остеотомию стандартным спиральным сверлом Ø 2.0 мм, Ø 2.4 мм и Ø 2.8 мм Завершающее сверло Ø 4 мм, L 6 мм, код JDDICS4D
короткий Ø 5.0 L 6	Начинайте остеотомию стандартным спиральным сверлом Ø 2.0 мм, Ø 2.4 мм и Ø 2.8 мм Завершающее сверло Ø 5 мм, L 6 мм, код JDDICS5

Примечание: Все размеры указаны в миллиметрах

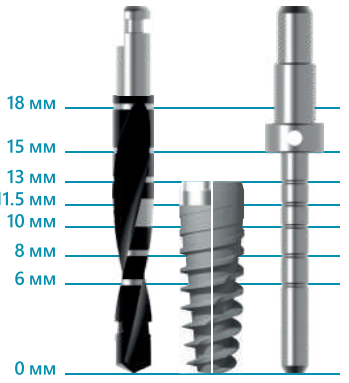

J DENTAL CARE

just smile

JD ICON®

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР:

ООО «Имплант Сервис»

115230, город Москва, Каширское шоссе,
дом 3, корпус 2, строение 2, офис 306

+7 (495) 970-65-17
office@jdentalcare.ru

jdentalcare.ru

JDentalCare srl
Via Dino Campana 2,
41123 Modena

jdentalcare.com

Made in Italy

FDA Approved